



+ Fonctionnalités et design

Le concept allie design et ergonomie. Il préserve l'intimité et le confort du patient tout en préservant une praticité de travail pour le personnel soignant.

+ Efficacité optimale des équipes de soins

Il permet d'accueillir simultanément 4 patients. La gestion de chacun est facilitée et offre une rapidité dans la surveillance de chacun.

+ Conception sur-mesure


Les cloisons sont entièrement conçues sur-mesure pour tenir compte de votre cahier des charges et de vos contraintes d'environnement : coloris uni ou bois, dimensions de la cloison, forme de la découpe...




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La conception sur-mesure des panneaux, en HPL compact de 10 mm, assure une stabilité optimale. Il est possible de les découper à la taille et forme de votre choix*. Un seul point d'alimentation est nécessaire pour 4 postes de soins. Il est suspendu au plafond et les cloisons reposent sur des pieds au sol afin de garantir une asepsie optimale et un nettoyage facilité.

Vue de face

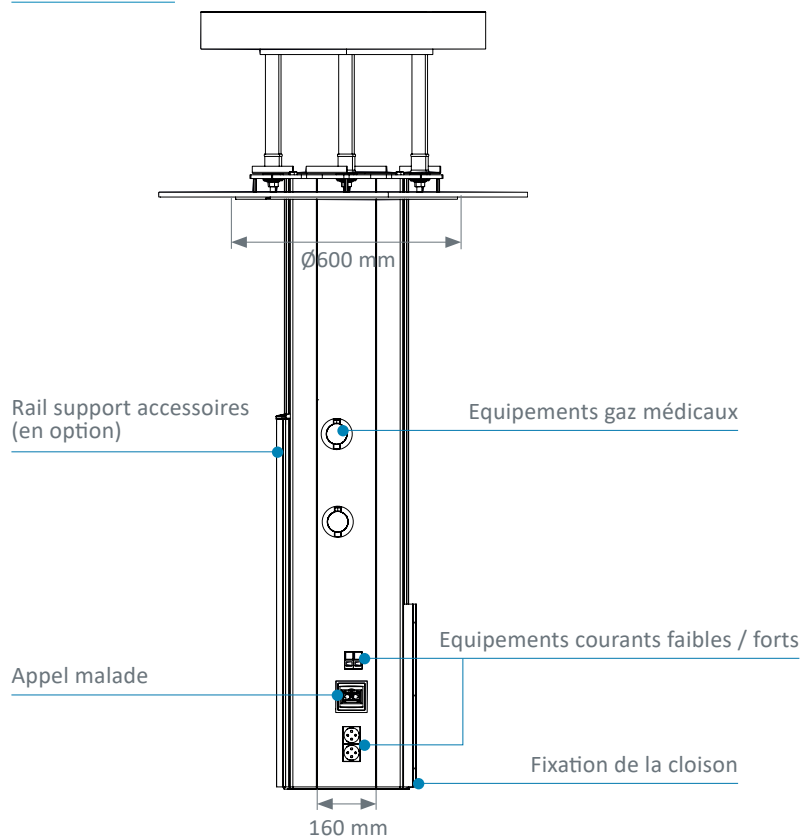

Vue en coupe

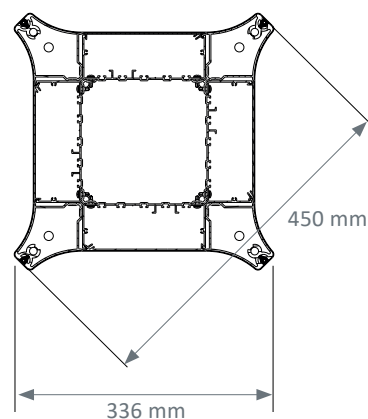

Exemple de configuration



*Dans la limite de la dimension maximale du panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Coloris

Le concept FLUIDYS à usage ambulatoire offre une large palette de teintes.

Seuls les panneaux proposés ci-dessous disposent d'un traitement antibactérien SANITIZED®.









Teintes unies

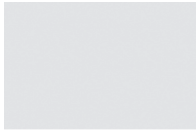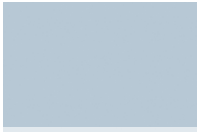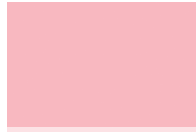 Bleu B086 Finition : FA	 Beige B116 Finition : FA	 Blanc B117 Finition : FA	 Bleu B124 Finition : FA	 Bleu C118 Finition : FA	 Céladon C190 Finition : FA
 Fumée F008 Finition : FA	 Gris G044 Finition : FA	 Orange G078 Finition : FA	 Jaune J018 Finition : FA	 Verte P092 Finition : FA	 Rose R058 Finition : FA

Plus de coloris disponibles sur <https://www.polyrey.com/collection/unis>

Teintes bois

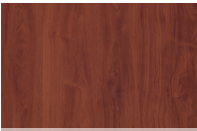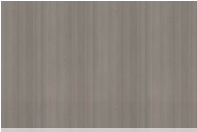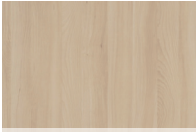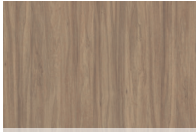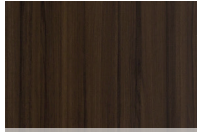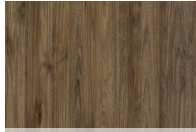 Bois de Pécan B023 Finition : FA	 Chêne Lavé C103 Finition : SEV	 Chêne Vendôme C133 Finition : SEV	 Cerisier Naturel C181 Finition : SEV	 Erable Nordique E028 Finition : FA	 Erable Féroé E103 Finition : EXM
 Frêne Cristal F058 Finition : SEV	 Frêne Monreale F061 Finition : SEV	 Hêtre Bergen H028 Finition : SEV	 Noisetier Naturel N056 Finition : EXM	 Noyer Havana N114 Finition : EXM	 Noyer Appalaches N118 Finition : EXM

Plus de coloris disponibles sur <https://www.polyrey.com/collection/bois>

Finition FA : Finition satin léger au grain ultra fin, toucher doux.

Finition EXM : Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originales

Finition SEV : La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse

NB : les couleurs imprimées peuvent différer des produits réels.

Rapprochez vous de notre force de vente pour visualiser nos échantillons.

Vous pourrez les recevoir sous 48h.

Porte battante (en option)



Les portes battantes situées sur les cloisons renforcent l'intimité tout en contribuant au design global de l'espace.

Tablette rotative (en option)



La tablette rotative sur-mesure permet de disposer un plateau de collation et/ou les effets personnels du patient.

EQUIPEMENTS

Le concept dispose de 4 faces et permet ainsi d'accueillir 4 patients simultanément tout en garantissant une tranquillité pour chacun. Cette capacité d'accueil augmente la rapidité et l'efficacité de gestion et de surveillance des patients.



Intégration des équipements électriques

La découpe jet d'eau du couvercle de la FLUIDYS permet une finition précise et sur-mesure, donnant la possibilité d'intégrer toutes formes de prises. Le montage affleurant des équipements électriques favorise le nettoyage et la désinfection du produit.



Intégration des fluides





Pour les prises gaz AFNOR, des plastrons en ABS/PC sont disponibles avec capot, pour toutes les autres normes de prises (BS, DIN), il n'y a pas de plastrons.



Spot de lecture FLEX-E LIGHT (en option)


Un spot permet d'intégrer discrètement un éclairage de lecture sur la gaine.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

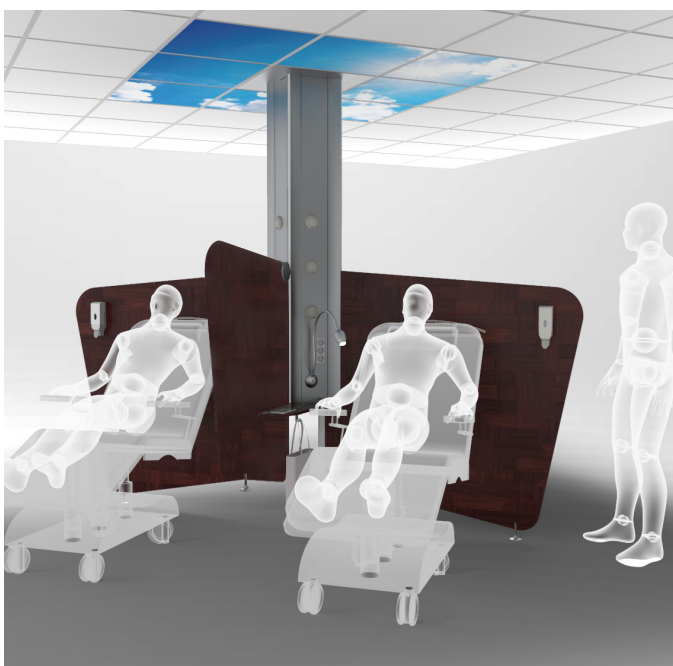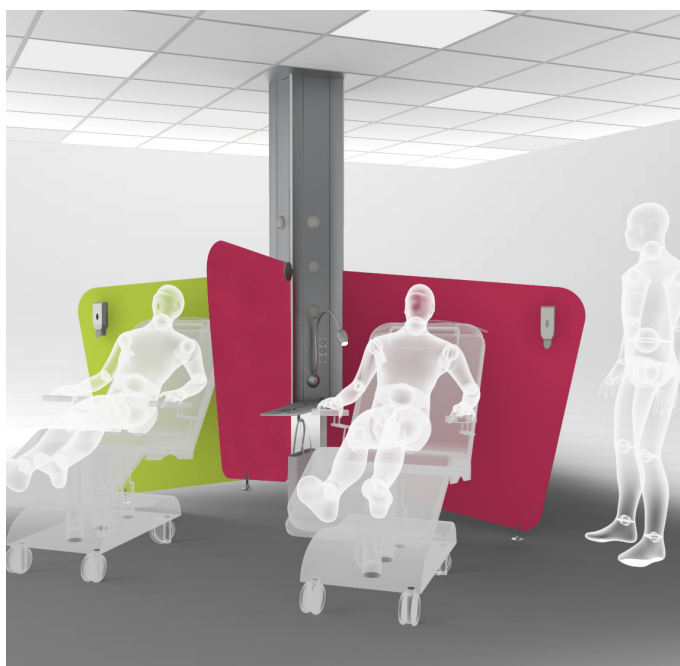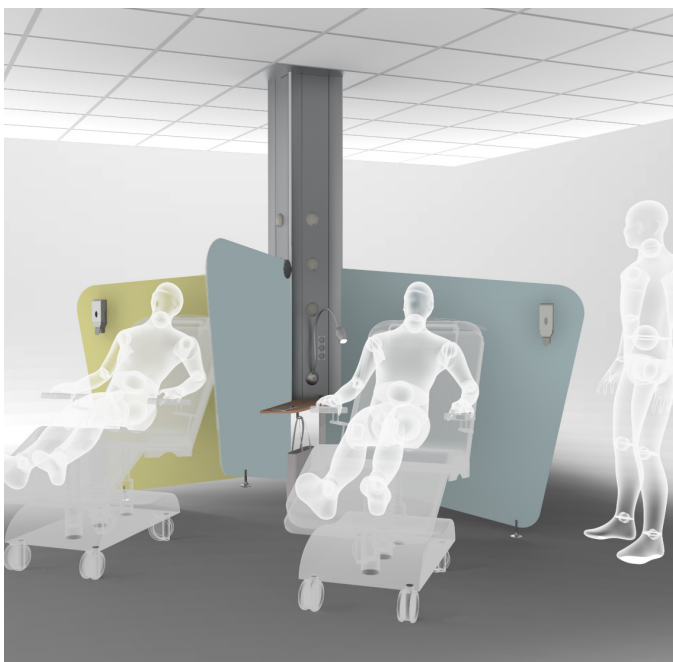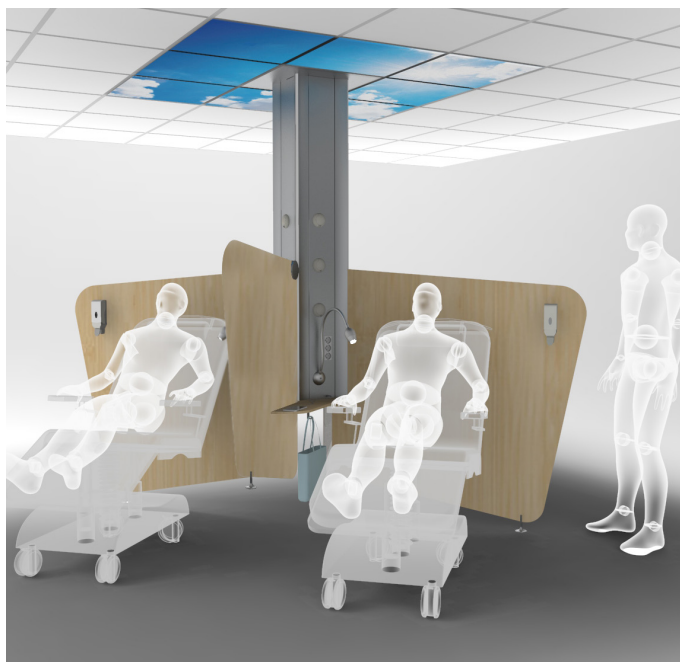


OPTION : CONCEPT COLONNE FLUIDYS POUR LES PLATEAUX TECHNIQUES

La colonne FLUIDYS pour plateaux techniques possède 4 faces. Elle peut être équipée avec ou sans rail support accessoires en fonction des besoins.

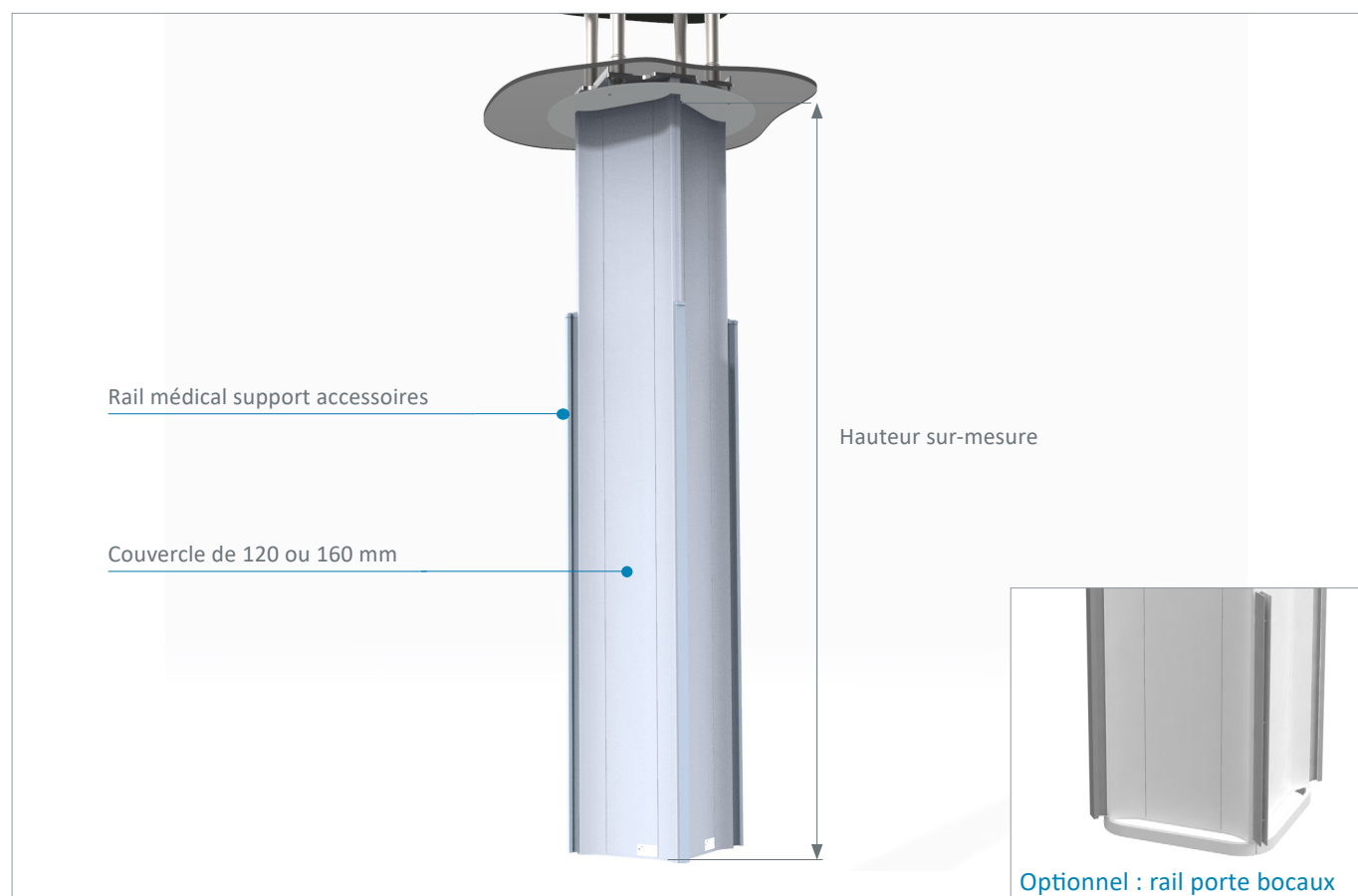

Vue en coupe (couvercle 160 mm)

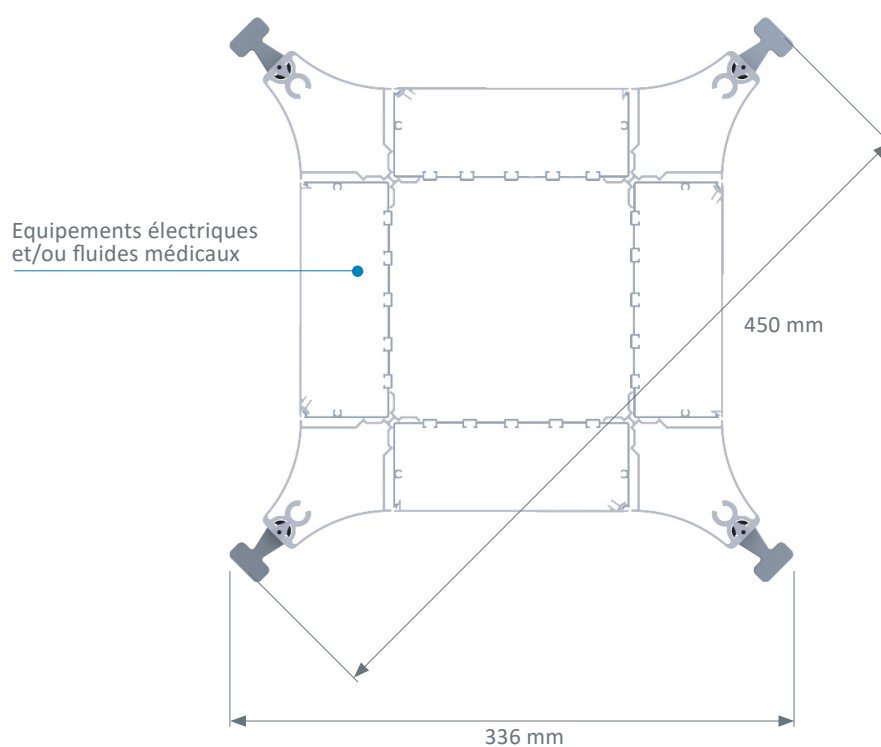



COMMERCIALISATION & SERVICE EN SUISSE




MED-INNOVA

Med-Innova SA | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normes & recommandations

- EN ISO 9001 et EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité
- Marquage CE Dispositifs Médicaux conformément aux impératifs de la Directive 93/42/CEE
- EN ISO 11197 : Gaines techniques à usage médical
- EN ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

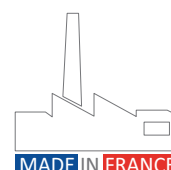

TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr