





Vorderansicht



Seitenansicht

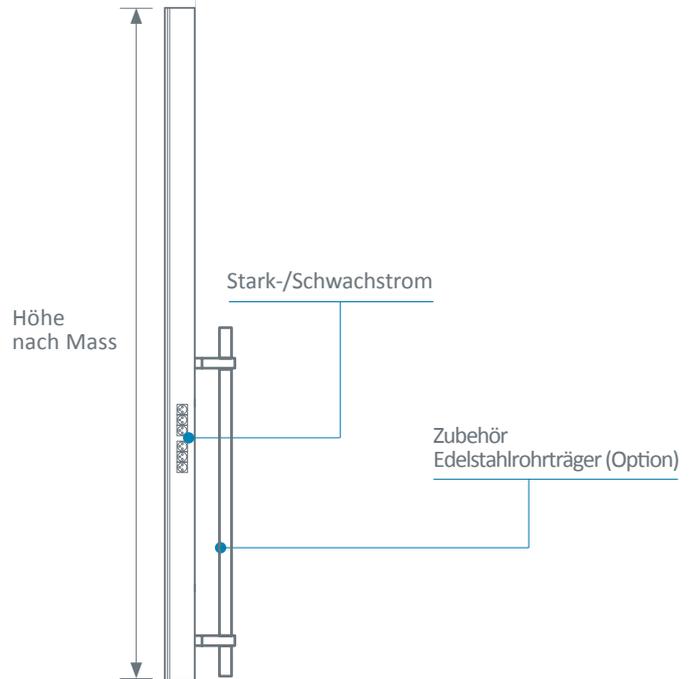

Querschnitt

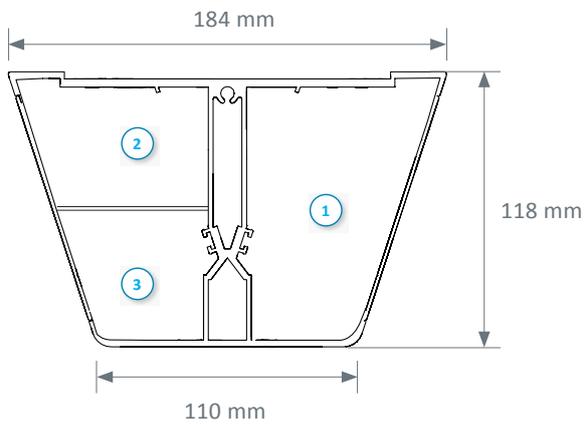

- ① Medizinische Gastechnik
- ② Starkstrom
- ③ Schwachstrom

Farbe

WEISS
RAL 9016


SIMPLE-CARE




Die SIMPLE- CARE-Leiste bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Integration von elektrischen Geräten und medizinischen Gasen.

Stromversorgung

Im hinteren Teil durch einen Ausschnitt Rückseite

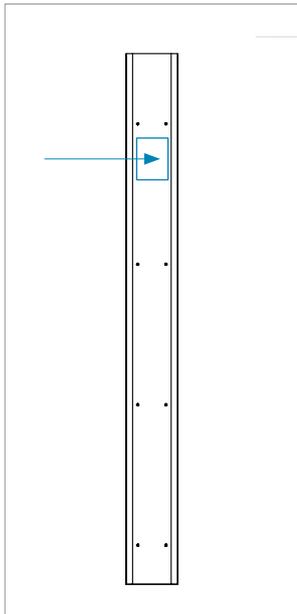


Über die Decke

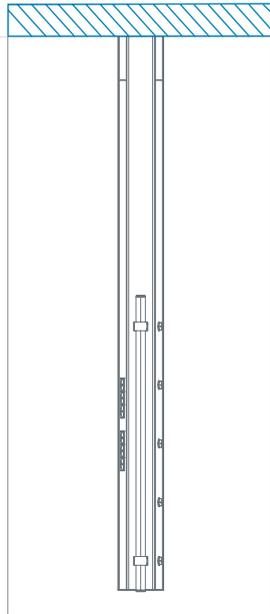

Installation

Dank der Schraubbefestigung bietet SIMPLE- CARE eine einfache und schnelle Installation.

Wand

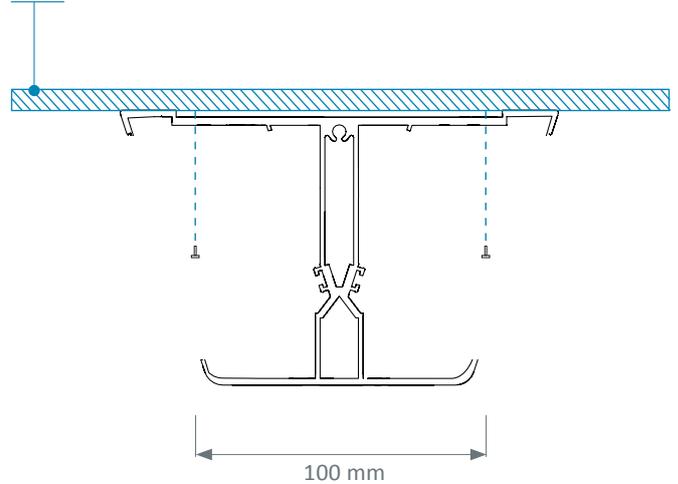

Integration von elektrischen Komponenten

Der Wasserstrahlschnitt der TECH-CARE Abdeckung ermöglicht eine präzise und massgeschneiderte Verarbeitung, die die Möglichkeit bietet, jede Form von Steckdosen zu integrieren. Die bündige Montage der elektrischen Geräte ermöglicht eine einfache Reinigung.

Integration von Gasentnahmestellen

Für Einbau jeglicher auf dem Markt angebotener Fabrikate möglich. Bspw. Heyer, Gloor, Dräger, Greggersen etc.



Geräte

Das Profil kann bei Bedarf mit einem Edelstahlrohr $\varnothing 38 \times 1000$ mm ausgestattet werden, um medizintechnisches Zubehör und/oder Schubladen bis zu einer Nutzlast von 100 kg anzubringen.



Beleuchtung

SIMPLE- CARE kann mit einer Wandleuchte aus dem TLV-Sortiment kombiniert werden, um eine komfortable und leistungsfähige Beleuchtungslösung zu bieten, die zum Wohlbefinden von Patienten und medizinischem Fachpersonal beiträgt.

Die Leiste kann optional ausgestattet werden mit:

einer Behandlungslampe mit Gelenkarm



Ein in die untere Verschlusskappe integriertes LED-Nachtlicht



1 x 1,2W



VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



MED-INNOVA

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30
 info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normen und Empfehlungen

- EN ISO 9001 & EN ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme,
- CE-Kennzeichnung Medizinische Geräte gemäss den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE
- EN ISO 11197: Medizinische Versorgungseinheiten,
- EN ISO 7396-1: Rohrleitungssysteme für medizinische Gase - Teil 1

