




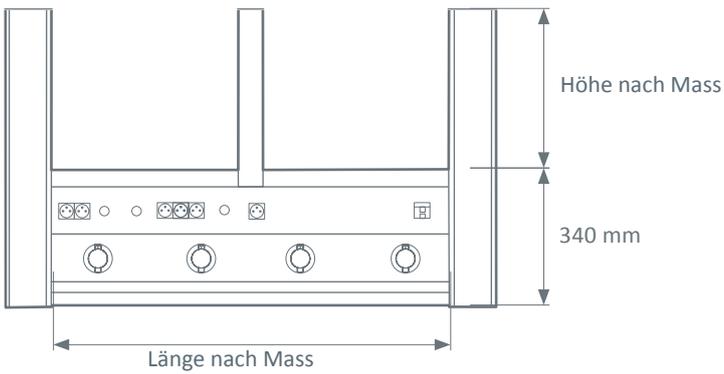

## Vorderansicht

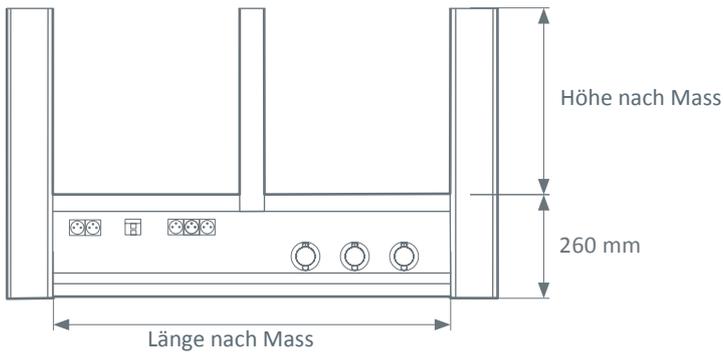


## Seitenansicht

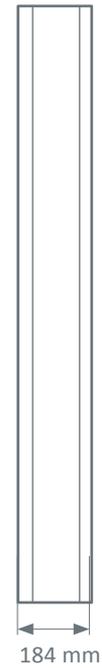


## Querschnitt

### Fluidys 160

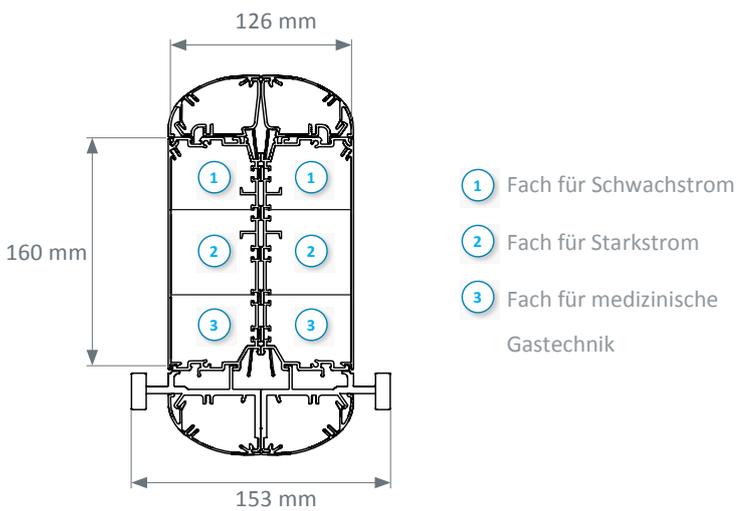

### Fluidys 120 + 120

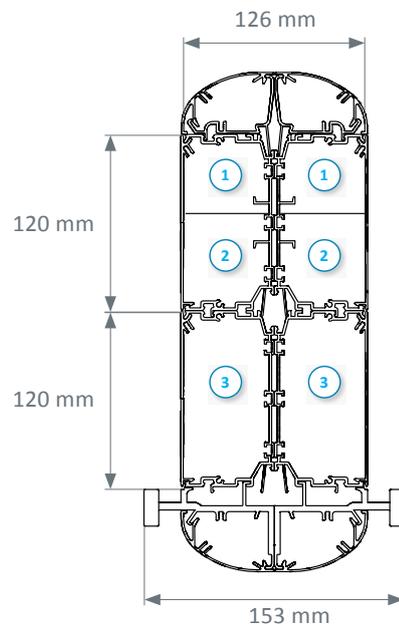

## Farbe

	WEISS RAL 9016	GRAU RAL 7040	Anodisiert
Aluminiumprofil	●		
Schutzrosetten	●	●	
Schiene(n) 25x10			●

# ZUBEHÖR

Der hängende Verteilerbalken FLUIDYS ist ein kompaktes medizinisches Gerät, das alle Funktionen bietet, die für die Teams Ihrer Notaufnahme, Intensivstation und Reanimation unerlässlich sind.

## Integration von elektrischen Komponenten

Der Wasserstrahlschnitt der FLUIDYS-Abdeckung ermöglicht eine präzise und massgeschneiderte Verarbeitung, die die Möglichkeit bietet, jede Form von Steckdosen Netzwerkdosen, Patientenrufe etc. zu integrieren. Die bündige Montage der elektrischen Geräte vereinfacht die Reinigung und Desinfektion.



## Integration von Gasentnahmestellen

Einbau jeglicher auf dem Markt angebotener Fabrikate möglich. Bspw. Heyer, Gloor, Dräger, Greggersen etc.



## Geräteschienen

Der Balken wird mit einer unteren Geräteschiene 25x10 mm über seine gesamte Länge an der Vorder- und Rückseite ausgestattet, um medizinisches Zubehör und Gerätewagen zu befestigen.

## Gerätewagen

Die Gerätewagen sind mit Edelstahlrohren  $\varnothing$  38 mm ausgestattet, haben eine Höhe von wahlweise 800 mm oder 1500 mm und tragen eine Nutzlast von 70 Kg. Sie enthalten eine Drehsperre über einen Hebel, der für das Pflegepersonal leicht zugänglich und einfach zu handhaben ist.



## Konsolen und Schubladen


Die Konsolen sind so konzipiert, dass sie den strengsten Anforderungen an Hygiene und Langlebigkeit entsprechen. Sie bestehen aus einer Oberfläche aus kompaktem Material mit weissem Kern (HPL).

Die Konsolen können mit einer oder zwei Schubladenmodule aus antibakteriellem Kydex-Material bestückt werden. Die Schubladen sind herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern.


## Belastungstabelle

	ABMESSUNGEN DER PLATTE	MAXIMALE BELASTUNG
A	405 x 355 mm	40 kg
B	605 x 455 mm	60 kg




## Konsolen

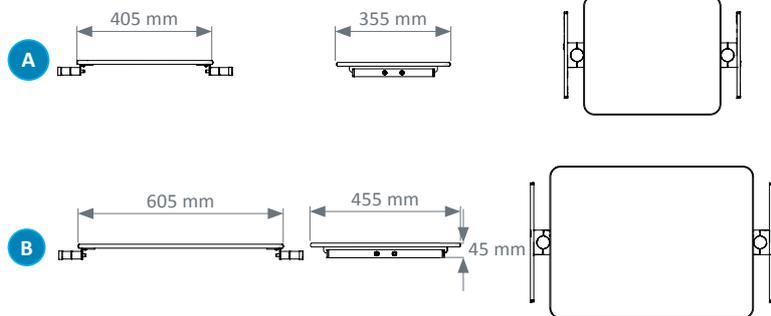

## Eine Schublade

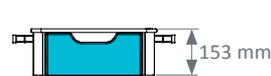

## Zwei Schubladen

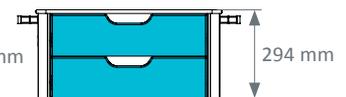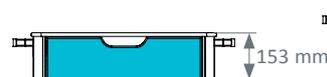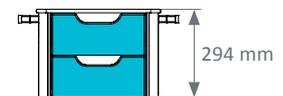

## Beleuchtung

Die FLUIDYS Beleuchtung ist leistungsstark, komfortabel und kontrolliert. Sie bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung zum Lesen und für eine effektive Pflege. Die Optiken der FLUIDYS wurden so konzipiert, dass sie eine optimale Kontrolle über die Beleuchtung ermöglichen. Das Ziel ist es, dazu beizutragen, das Wohlbefinden des Pflegepersonals und des Patienten zu verbessern.

# TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Aluminiumprofil 160 mm oder zwei Profile 120 mm
<b>Deckenbefestigung</b>	Sonderausführung für jedes Gebäude Zusätzliche Aufhängungen: alle 2500 mm
<b>Abgehängter Balken</b>	Länge nach Mass (bis zu 500 mm als Einzelprofil) Empfohlene Höhe unter dem Balken: 1700 mm
<b>Halterungen</b>	beidseitig medizinische Geräteschienen 25 x 10 mm
<b>Indirekte Beleuchtung</b>	LED: 7093 lumens (5ft)
<b>Direkte Beleuchtung</b>	LED: 2581 lumens (2ft)
<b>Nachtlicht</b>	LED: 350 lumens

VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



**MED-INNOVA**

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30  
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

## Normen und Empfehlungen

- EN ISO 9001 & EN ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme
- CE-Kennzeichnung Medizinische Geräte gemäß den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE
- EN ISO 11197: Medizinische Versorgungseinheiten
- EN ISO 7396-1: Rohrleitungssysteme für medizinische Gase - Teil 1
- AFE-Empfehlungen zur Beleuchtung in Gesundheitseinrichtungen



Die technischen Daten dienen nur als Anhaltswert. TLV behält sich das Recht vor, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern. (E) - Überarbeitung (TT/MM/JJ): 31.05.2021