



+ Funktionen und Design

Das Konzept vereint Design und Ergonomie. Es bewahrt die Intimsphäre und den Komfort des Patienten und ist gleichzeitig praktisch für das Pflegepersonal.

+ Optimale Effizienz der Pflegeteams

Ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von 4 Patienten. Die Behandlung jedes Einzelnen wird erleichtert und bietet Schnelligkeit bei der Überwachung jedes Einzelnen.

+ Konzept Nach Mass


Die Trennwände werden vollständig nach Mass entworfen, um Ihr Lastenheft und Ihre Umgebungsaufgaben zu berücksichtigen: Uni- oder Holzfarben, Maße der Trennwand, Form des Ausschnitts...




TECHNISCHE DATEN

Das massgeschneiderte Design der Paneele aus 10 mm kompaktem HPL sorgt für optimale Stabilität. Es ist möglich, sie auf jede beliebige Grösse und Form zuzuschneiden*. Für 4 Pflegestationen ist nur ein Versorgungspunkt erforderlich. Er ist von der Decke abgehängt und die Trennwände stehen auf Bodenfüssen, um eine optimale Keimfreiheit und eine einfache Reinigung zu gewährleisten

Vorderansicht

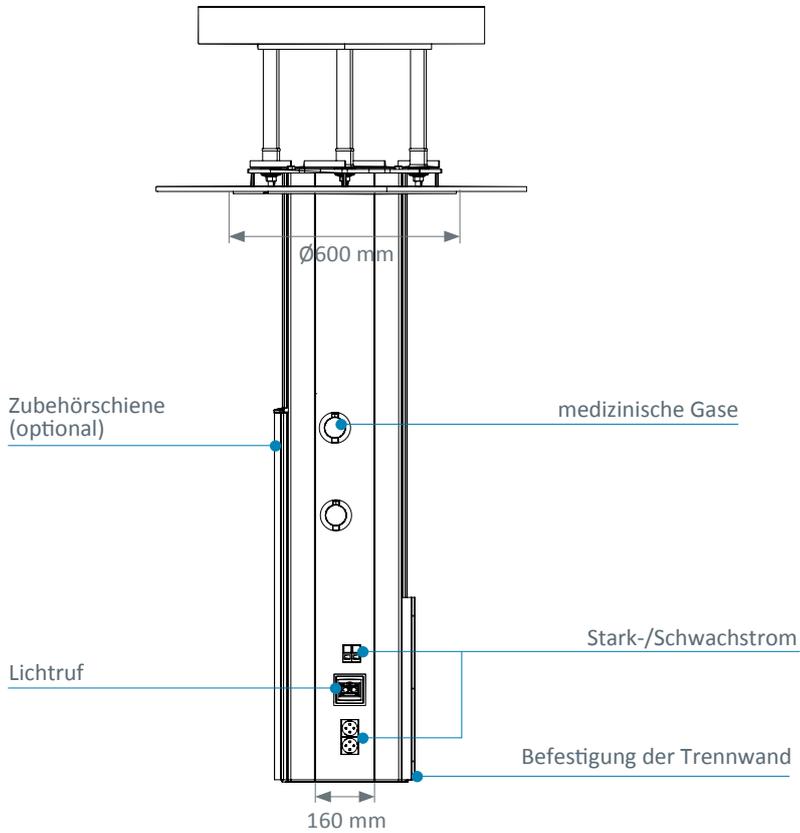

Querschnittsansicht

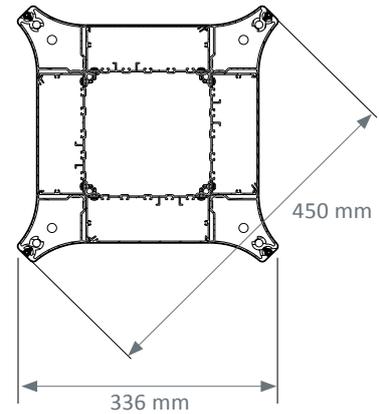

Beispielkonfiguration



*Innerhalb der maximalen Grösse der Platte

Standardfarben

Das FLUIDYS-Konzept für den ambulanten Gebrauch bietet eine breite Palette an Farbtönen. Nur die unten angebotenen Platten verfügen über eine antibakterielle SANITIZED®-Behandlung.



Unifarbene Töne

Blau B086 Finishing : FA	Beige B116 Finishing : FA	Weiß B117 Finishing : FA	Blau B124 Finishing : FA	Blau C118 Finishing : FA	Seladon C190 Finishing : FA
Rauch F008 Finishing : FA	Grau G044 Finishing : FA	Orange G078 Finishing : FA	Gelb J018 Finishing : FA	Grün P092 Finishing : FA	Rose R058 Finishing : FA

Weitere Farben erhältlich auf <https://www.polyrey.com/collection/unis>

Holzdekor

Pekannussholz B023 Finish : FA	Gewaschene Eiche C103 Finish : SEV	Vendôme Eiche C133 Finish : SEV	Kirschbaum Natur C181 Finish : EXM	Nordischer Ahorn E028 Finish : FA	Färöer Ahorn E103 Finish : EXM
Esche Kristall F058 Finish : SEV	Monreale Ash F061 Finish : SEV	Esche Monreale H028 Finish : SEV	Haselnuss Natur N056 Finish : EXM	Walnuss Havana N114 Finish : EXM	Walnuss Appalachia N118 Finish : EXM

Weitere Farben erhältlich auf <https://www.polyrey.com/collection/bois>

Finish FA: Leichtes Satin-Finish mit ultrafeiner Körnung, fühlt sich weich an.

Finish EXM: Ultramatt mit rauer Haptik, die die Authentizität der Originalmaterialien wiedergibt

SEV-Finish: Die Holzfaser wird subtil von einer unregelmäßig gekörnten, seidigen Oberfläche unterstützt.

Hinweis: Die gedruckten Farben können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufspersonal, um sich unsere Muster anzusehen.


Sie können sie innerhalb von 48 Stunden erhalten.

Flügeltür (optional)



Die Flügeltüren an den Trennwänden verstärken die Privatsphäre und tragen gleichzeitig zum Gesamtdesign des Raumes bei.

Drehbares Tablett (optional)

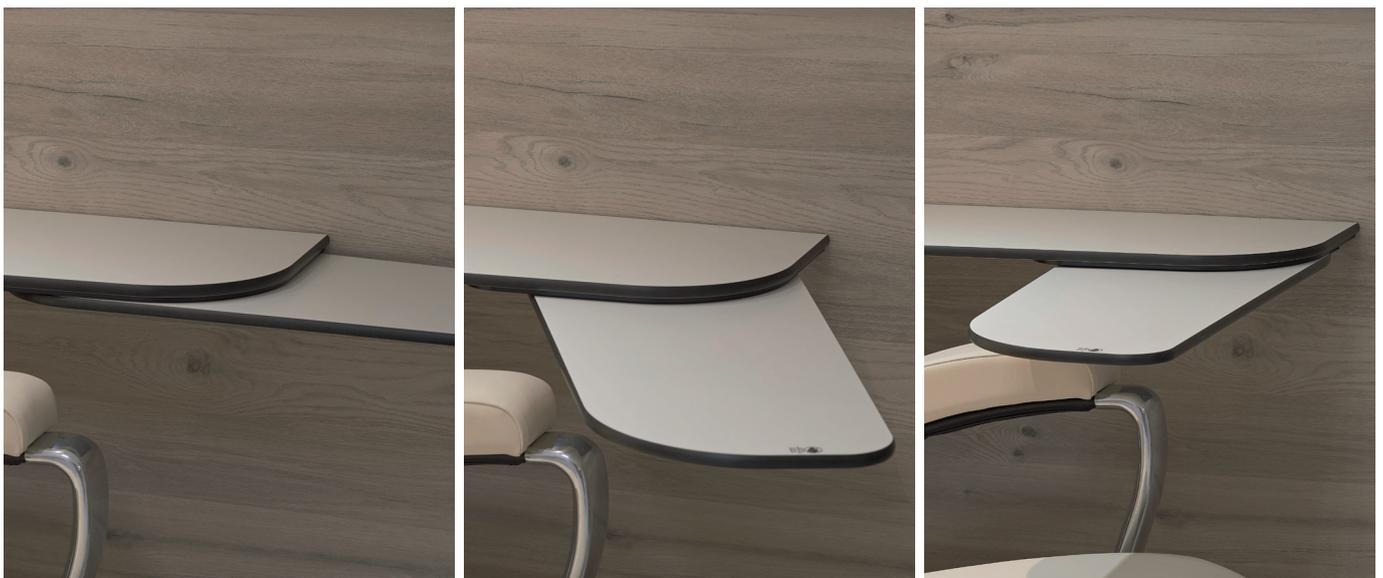

Auf dem massgefertigten, drehbaren Tablett können Sie ein Snack-Tablett und/oder die persönlichen Gegenstände des Patienten abstellen.

ZUBEHÖR

Das Konzept verfügt über 4 Seiten und ermöglicht so die gleichzeitige Unterbringung von 4 Patienten, wobei für jeden eine gewisse Ruhe gewährleistet ist. Diese Aufnahmekapazität erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Behandlung und Überwachung der Patienten.



Integration von elektrischen Komponenten

Der Wasserstrahlschnitt der FLUIDYS-Abdeckung ermöglicht eine präzise und maßgeschneiderte Verarbeitung, die die Möglichkeit bietet, jede Form von Steckdosen zu integrieren. Die bündige Montage der elektrischen Geräte begünstigt die Reinigung und Desinfektion.



Integration Gasentnahmestellen





Einbau jeglicher auf dem Markt angebotener Fabrikate möglich.
Bspw. Heyer, Gloor, Dräger, Greggersen etc.



Spotleselampe FLEX-E LIGHT(optional)


Ein Spot ermöglicht es, eine Lesebeleuchtung unauffällig in den Kanal zu integrieren.

BEISPIELKONFIGURATION

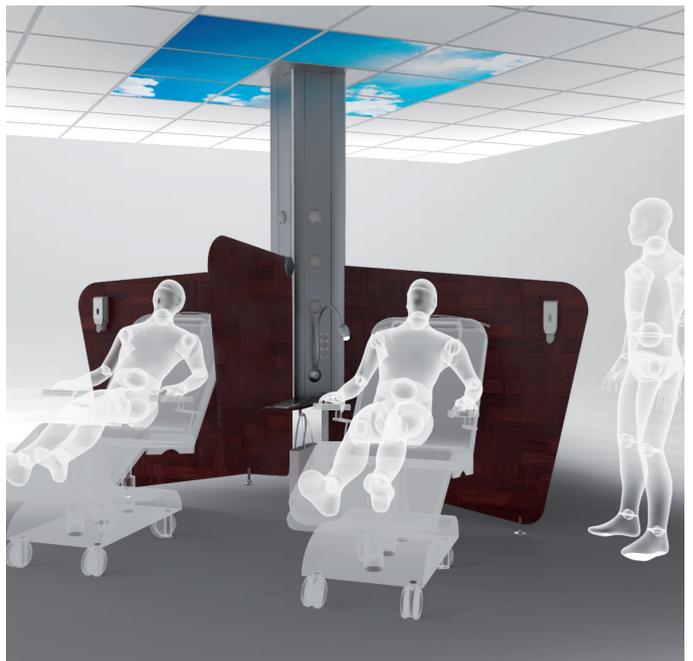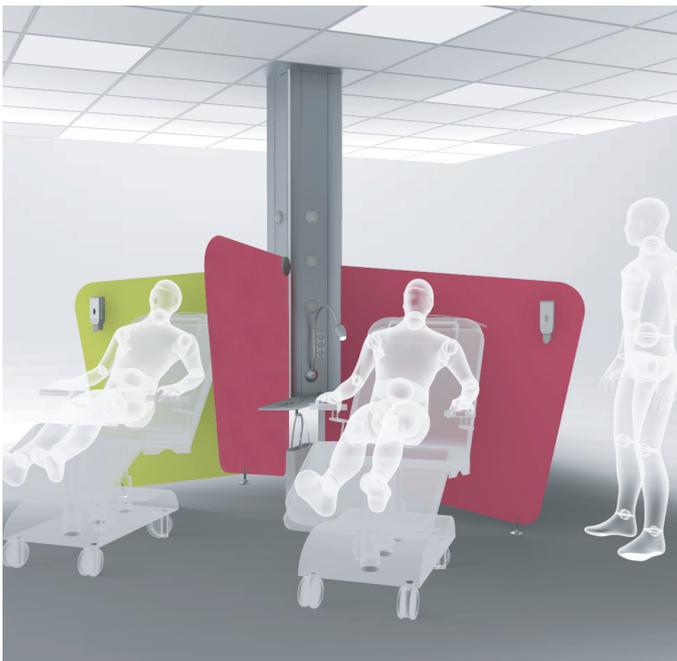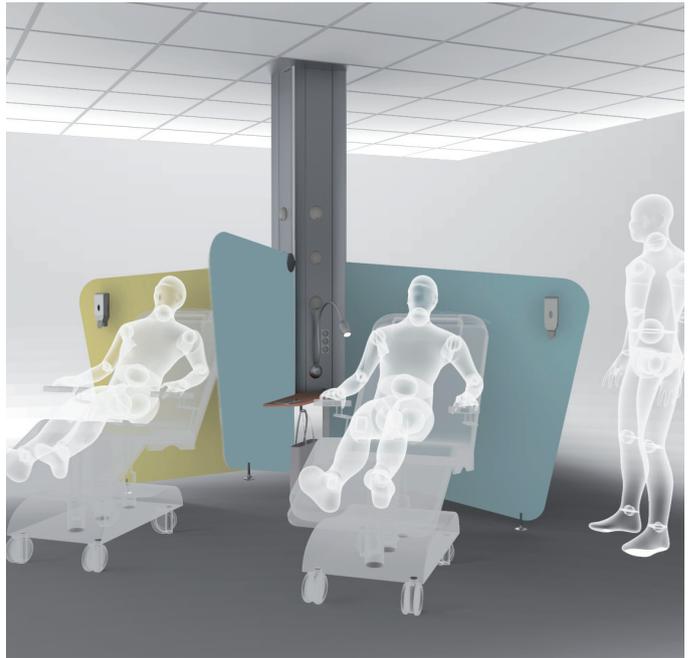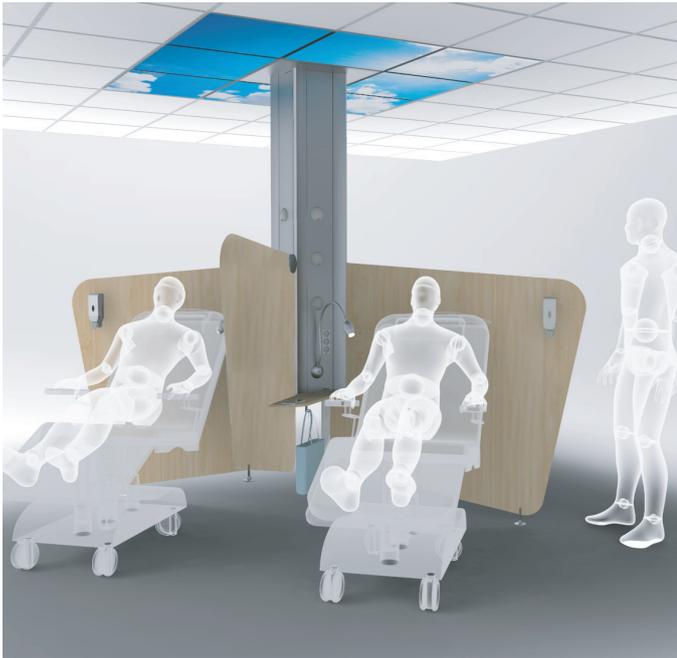


OPTION: FLUIDYS-SÄULENKONZEPT FÜR TECHNISCHE PLATTEN

Die FLUIDYS-Säule für Technikräume hat vier Seiten. Sie kann je nach Bedarf mit oder ohne Zubehörschiene ausgestattet werden.

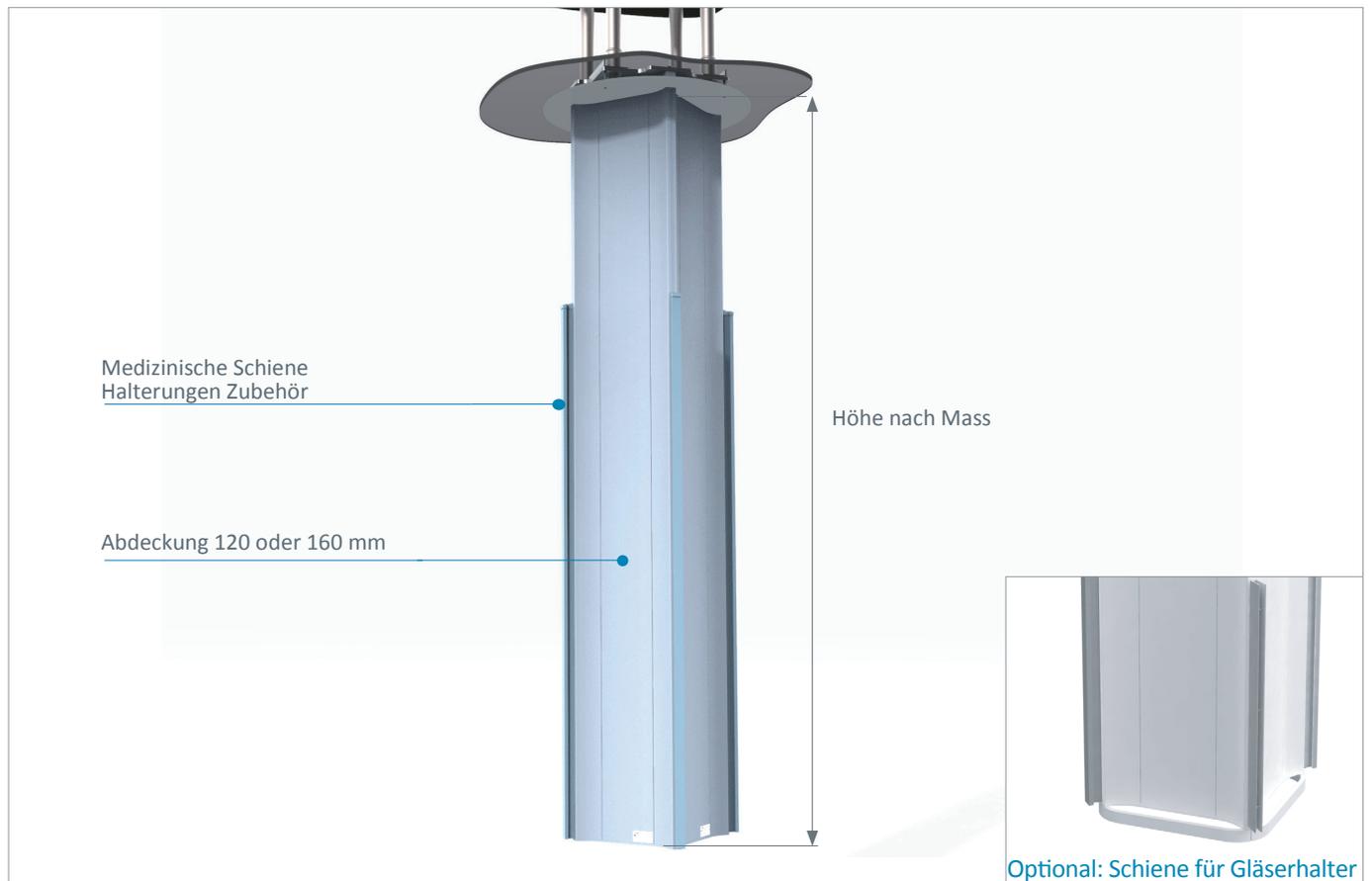

Querschnittsansicht (Abdeckung 160 mm)

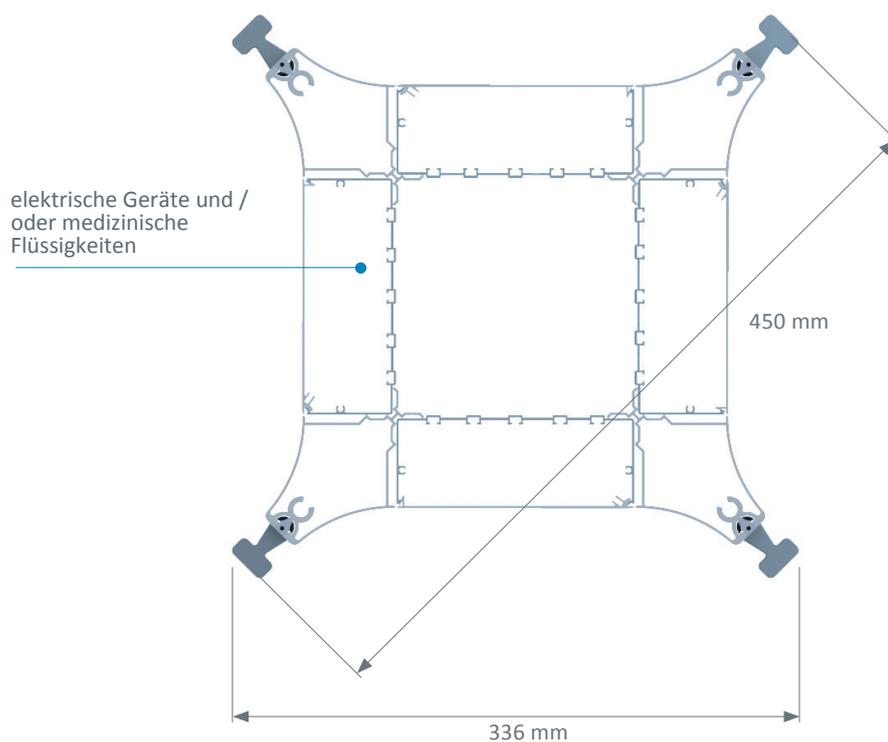



(J)/MM/AA) - 01/06/2022

VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



MED-INNOVA

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normen und Empfehlungen

- EN ISO 9001 & EN ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme
- CE-Kennzeichnung Medizinische Geräte gemäss den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE
- EN ISO 11197: Medizinische Versorgungseinheiten
- EN ISO 7396-1: Verteilersysteme für medizinische Gase - Teil 1



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif, TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (C) - Révision