



+ Edelstahlrohr für Zubehöre


SIMPLE-CARE ermöglicht mit ihrem optionalen Tragrohr aus Edelstahl die Befestigung von Zubehörteilen und medizintechnischen Geräten.

+ Beleuchtung nach Mass


Der vertikale Kanal kann nach Ihren Wünschen mit einer Wandleuchte aus dem TLV-Sortiment kombiniert werden, um eine effiziente und komfortable Beleuchtungslösung für Patienten und Angehörige zu bieten.




Vorderansicht

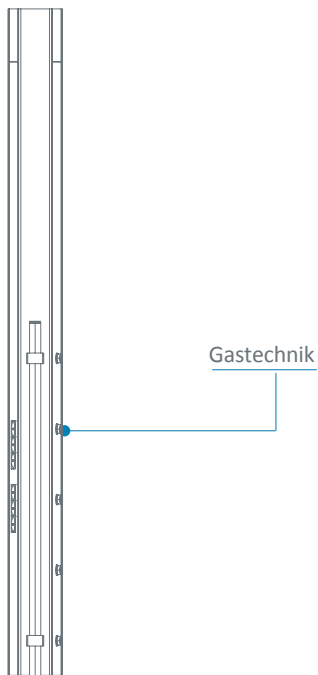

Seitenansicht

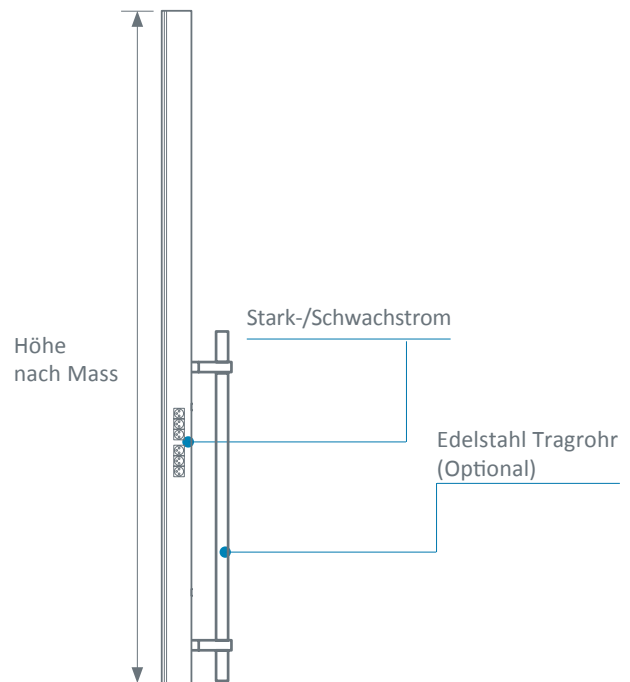

Querschnittsansicht

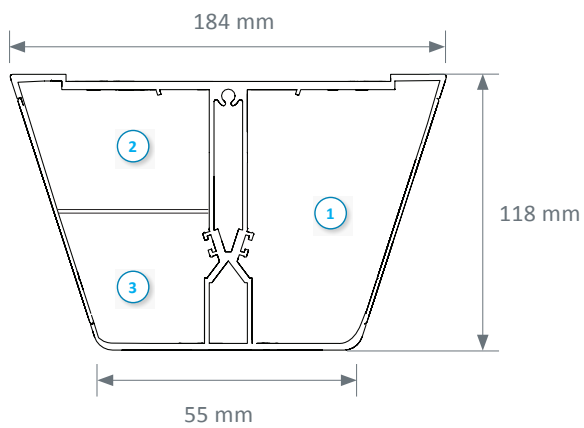

- ① Fach für Gastechnik
- ② Fach für Starkstrom
- ③ Fach für Schwachstrom

Farbe

WEISS
RAL 9016

SIMPLE-CARE




SIMPLE- CARE bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Integration von elektrischen Geräten und medizinischen Gasen.

Stromversorgung

Elle est conçue pour être alimentée :


Im hinteren Teil durch einen Ausschnitt im Boden der Leiste

Durch die Decke

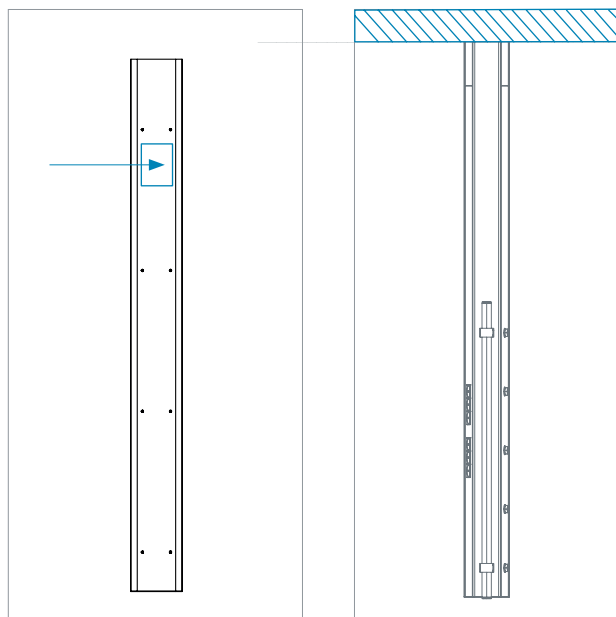

Installation

Dank der Schraubbefestigung am Leistenboden bietet SIMPLE- CARE eine einfache und schnelle Installation.

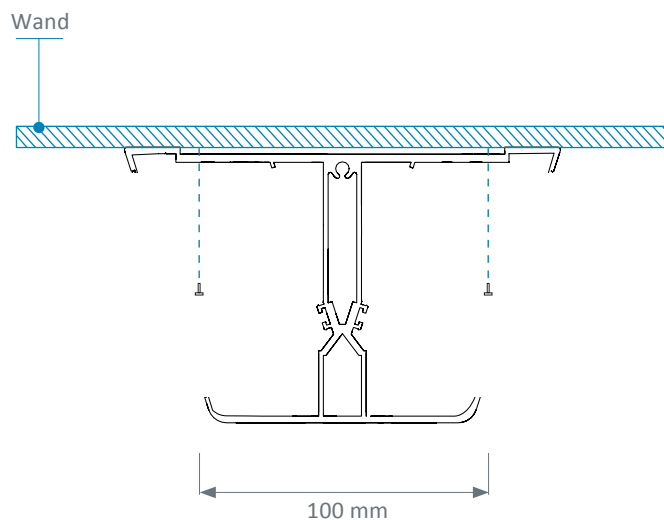


Integration von elektrischen Komponenten

Der Wasserstrahlschnitt der FLUIDYS-Abdeckung ermöglicht eine präzise und massgeschneiderte Verarbeitung, die die Möglichkeit bietet, jede Form von Steckdosen, Netzwerkdosen, Patientenrufe etc. zu integrieren. Die bündige Montage der elektrischen Geräte vereinfacht die Reinigung und Desinfektion.



Integration von Gasentnahmestellen

Einbau jeglicher auf dem Markt angebotener Fabrikate möglich.
Bspw. Hoyer, Gloor, Dräger, Greggersen etc.

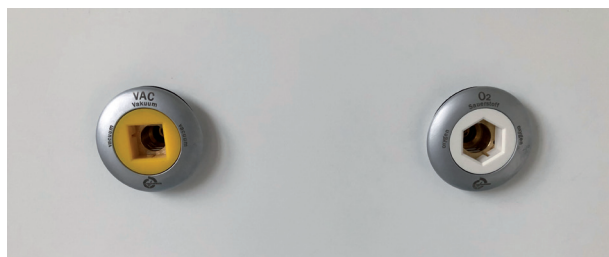

Zubehöre

SIMPLE- CARE kann bei Bedarf mit einem Edelstahlrohr $\varnothing 38 \times 1000$ mm ausgestattet werden, um medizintechnisches Zubehör und/oder Schubladen bis zu einer Nutzlast von 100 kg zu befestigen.

Beleuchtung

SIMPLE- CARE kann mit einer Wandleuchte aus dem TLV-Sortiment kombiniert werden, um eine komfortable und leistungsfähige Beleuchtungslösung zu bieten, die zum Wohlbefinden von Patienten und medizinischem Fachpersonal beiträgt.

Die Leiste kann optional ausgestattet werden mit:

Spot für das Lesen am Flexiblen Schlauch
FLEX-E LED (grau eloxiert natur)



Eine in den unteren Verschluss integrierte
LED-Orientierung/Nacht-Beleuchtung



VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



MED-INNOVA

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normen & Empfehlungen

- EN ISO 9001 & EN ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme
- CE-Kennzeichnung Medizinische Geräte gemäss den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE
- EN ISO 11197: Medizinische Versorgungseinheiten
- EN ISO 7396-1: Rohrleitungssysteme für medizinische Gase - Teil 1

